


INSTI®

Самотест за ХИВ


Инструкции за употреба

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

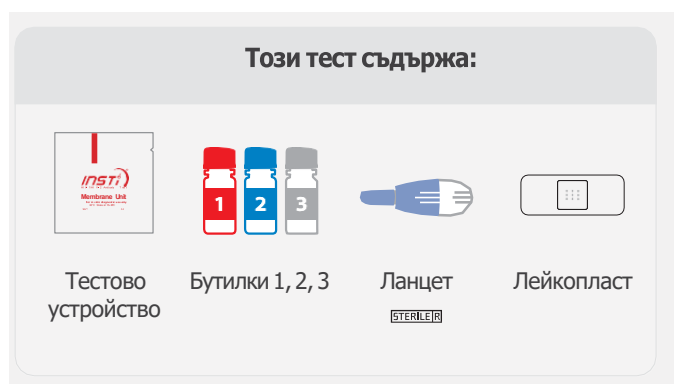

Подготовка

Обучителният видеоклип е наличен на: www.insti.com

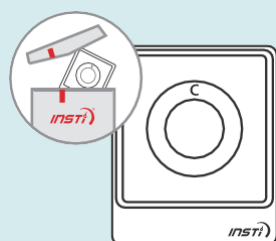




1. Отворете торбичката на тестовото устройство.
ВАЖНО: Почистете и изсушете ръцете си.

2. Поставете тестовото устройство върху равна повърхност.

3. Махнете капачката на бутилка 1. Поставете я върху равна повърхност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бутилка 1 съдържа течност. Боравете с нея внимателно.

Стъпка 1: Вземане на кръв




Ако имате проблеми с вземането на кръв, вижте често задаваните въпроси на обратната страница.

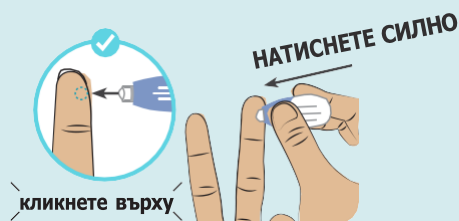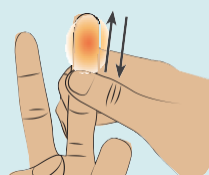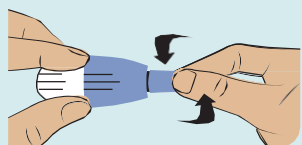

1. Завъртете и издърпайте върха на ланцета. Изхвърлете върха.

2. Потъркайте пръста и ръката си, за да увеличите притока на кръв.

3. Поставете ланцета отстрани на върха на пръста.

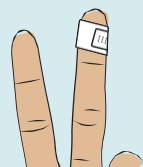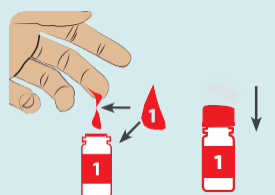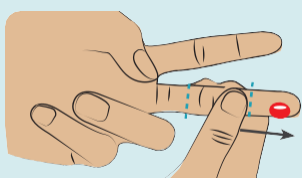

4. Потъркайте пръста си, за да се образува **ГОЛЯМА** капка кръв.

5. Капнете 1 капка да **падне** в бутилка 1. Завинтете капачката на бутилка 1.

6. Поставете лейкопласта.

Стъпка 2: Тест



1. Разклатете и изсипете цялата течност. Изчакайте, докато течността изчезне.

2. Разклатете и изсипете цялата течност. Изчакайте, докато течността изчезне.
СЪВЕТ: Може да се наложи леко да потупате бутилка 2, за да се излее цялата течност.

3. Разклатете и изсипете цялата течност. Изчакайте, докато течността изчезне.


Стъпка 3: Отчитане на резултата

Отчетете резултата веднага в рамките на 1 ЧАС.



Отрицателен

Резултатът от Вашия тест е отрицателен.

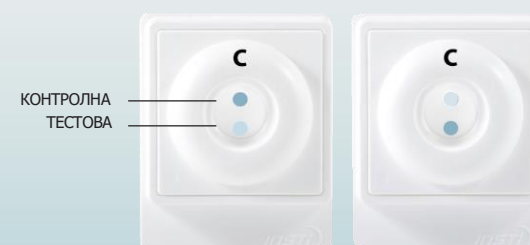

Положителен

Две точки означават, че резултатът от теста е положителен. Вие вероятно сте ХИВ позитивен(а). Положителните резултати **ТРЯБВА** да бъдат потвърдени от лекар.



Невалиден

Вашият тест е неуспешен. Трябва да се появи контролна точка, за да е сигурно, че тестът е извършен правилно.

СЪВЕТ: едната точка трябва да е по-светла от другата. В редки случаи на тестовата точка може да се появи едва забележим пръстен; това е положителен резултат.

Отрицателен резултат

Както при много други тестове, има вероятност резултатите да са грешни. За да намалите вероятността от получаване на грешни резултати, следвайте точно тези инструкции и използвайте теста правилно. Ако резултатът Ви е отрицателен, но сте участвали в дейности, носещи риск от ХИВ, през последните 3 месеца, може да сте в така наречения „прозоречен период“, затова Ви препоръчваме да повторите теста на по-късна дата.

Положителен резултат

Възможно най-скоро се консултирайте с лекар и го информирайте, че сте си правили самотест за ХИВ. Всички положителни резултати трябва да бъдат потвърдени от лабораторен тест.

Какво следва, ако резултатът е положителен?
Да имате ХИВ не означава, че сте болен(а) от СПИН. При ранно диагностициране и лечение е малко вероятно да развиете СПИН.

Изхвърляне

Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Сложете всички компоненти обратно във външната опаковка. Изхвърлете я в кофата за боклук.




INSTI[®]

HIV Self Test


Instructions For Use

READ BEFORE USE

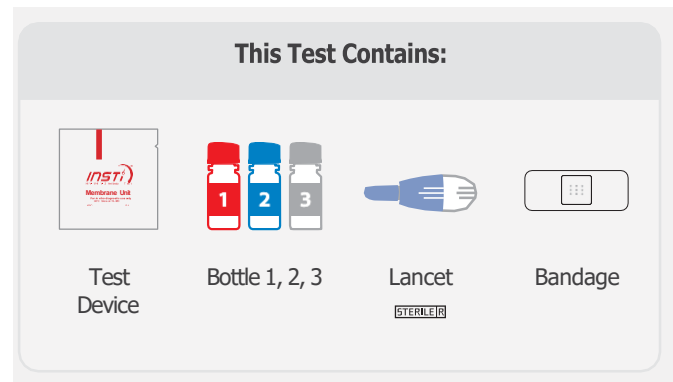

Preparation

Training video available at: www.insti.com

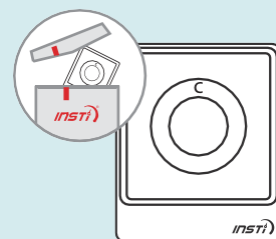

1. Open test device pouch.
IMPORTANT: Clean and dry hands.




2. Place test device on a flat surface.




3. Remove cap of Bottle 1. Place on flat surface.
WARNING: Bottle 1 contains liquid. Handle with care.

Step 1: Collect Blood


If you have trouble collecting blood, see Frequently Asked Questions on reverse side.

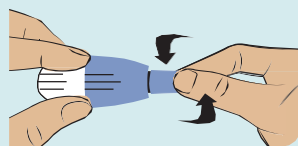


1. Twist and pull out lancet tip. Discard tip.

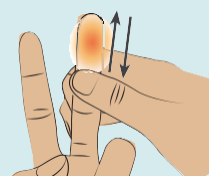


2. Rub finger and hand to increase blood flow.

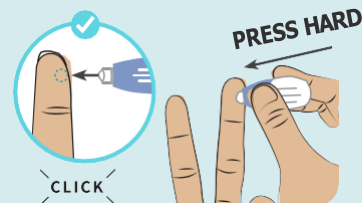


3. Place lancet on the side of finger tip.

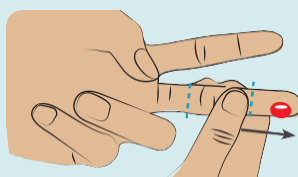

4. Rub finger to create a **LARGE** drop of blood.

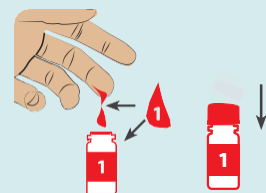


5. Let 1 drop **FALL** into Bottle 1.
Twist on cap of Bottle 1.

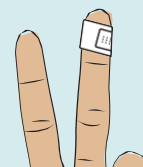


6. Apply adhesive bandage.


Step 2: Test

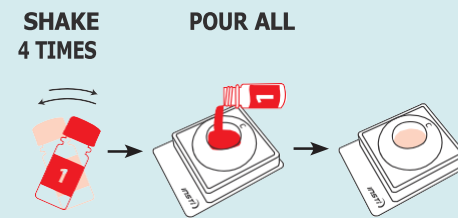

1. Shake and pour all liquid.
Wait until liquid disappears.

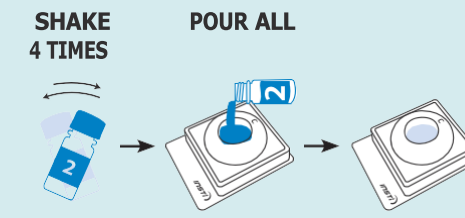

2. Shake and pour all liquid.
Wait until liquid disappears.
TIP: You may need to gently tap Bottle 2 to get all the liquid out.

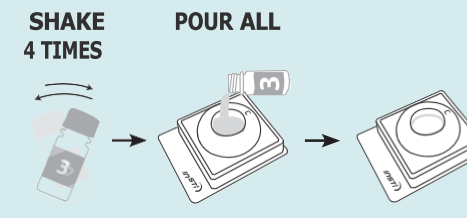

3. Shake and pour all liquid.
Wait until liquid disappears.


Step 3: Read Result

Read result right away to within 1 HOUR.




Negative

Your test result is negative.

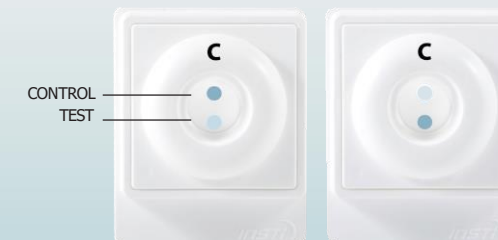

Positive

Two dots means your test result is positive. You are probably HIV positive. Positive results **MUST** be confirmed by a doctor.

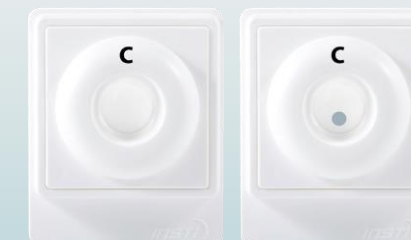

Invalid

Your test did not work. Control dot must appear to indicate that the test has been performed correctly.

TIP: One dot may be lighter than the other. In rare instances, a faint ring may appear at the test dot; this is a positive result.

A Negative Result

As with many tests, there is a chance for false results. To reduce the chance of false results, be sure to follow the instructions and use the test correctly. If you have a negative result but you were involved in an HIV-risk activity in the past 3 months, you could be in what is called the "window period" and it is recommended to repeat testing at a later date.

A Positive Result

Consult a doctor as soon as possible and inform him/her that you have performed a self test for HIV. All positive results must be confirmed by a laboratory test.

What Next After A Positive Result?

Having HIV does not mean you have AIDS. With early diagnosis and treatment, it is unlikely that you will develop AIDS.

Disposal

Dispose in accordance with local regulations. Put all items back into the outer packaging. Throw away into waste bin.



