

# POTASSIUM-U preservative free

## КАЛИЙ – У без консервант

капки за очи, разтвор без консервант

### 1. Какво представлява КАЛИЙ – У без консервант и за какво се използва

КАЛИЙ-У без консервант е изотоничен очен разтвор за овлажняване, съдържащ калиев йодид като добавка. Той е предназначен за накапване в окото. Добавката калиев йодид действа като почиства окото от свободните радикали на кислорода. Тези свойства на калиевия йодид се използват за профилактика и за поддържащо лечение при ексудация (натрупване на течност в тъканите) и кръвоизлив в окото.

Без консултация с офталмолог може да се използва просто за овлажняване на окото, като се накапе в окото или за приготвянето на компрес на клепачите. Продуктът се използва като допълнително средство за овлажняване на окото и за подпомагане на някои резорбционни процеси (особено на ексудати, кръвене от Corpus vitreum и катаракта с различна етиология) в окото.

КАЛИЙ-У без консервант може да се използва от възрастни, юноши и деца.

КАЛИЙ-У без консервант не съдържа консервант, така че е подходящ за хора с чувствителни очи.

### 2. Какво трябва да знаете преди да използвате КАЛИЙ-У без консервант

**Не използвайте КАЛИЙ-У без консервант, ако сте алергични към някоя от съставките на продукта (Вж. точка 6).**

Капките за очи КАЛИЙ-У без консервант не трябва да се използват и в следните случаи:

- бременност и кърмене
- хронична пиодермия на кожата на лицето
- хеморагични диатези
- пациенти с нарушена функция на щитовидната жлеза
- новородени

Ако в момента използвате други продукти за очи, препоръчително е да се изчака поне 5 минути между приложението на всеки от тях.

### 3. Как да използвате КАЛИЙ-У без консервант

Точната дозировка и продължителността на приложение на продукта се определят от лекар.

Обикновено 1-2 капки от 2-4 пъти дневно се прилагат в конюнктивалната торбичка на окото.

#### Предупреждение


Непосредствено след нанасянето на продукта може да изпитате временно замъглено зрение. В този случай не шофирайте, не работете с машини и изчакайте докато започнете да виждате отново ясно.

#### Употреба при хора, носещи контактни лещи

Ако носите контактни лещи трябва да ги свалите преди употребата на КАЛИЙ-У без консервант. След като използвате КАЛИЙ-У без консервант, трябва да изчакате 20 минути, преди да поставите отново контактните си лещи.

#### Инструкция за употреба


1. Измийте ръцете си и седнете, или застанете прав удобно.
2. Развийте капачката на бутилката.

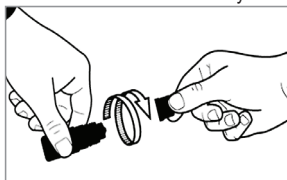

3. Задръжте бутилката обърната надолу между палеца си и останалите пръсти.
4. Преди първото приложение се препоръчва първата капка да бъде накапана извън окото чрез леко стисване на бутилката, тъй като при силно и нерегулирано стискане е възможно да изтече по-голямо количество от разтвора.
5. Използвайте пръста си, за да дръпнете леко долния клепач на засегнатото око.



- Поставете върха на капкомера близо до окоето си, но така, че да не докосва окоето или съседните му области.
- Стиснете леко бутилката, така че само 1 капка да попадне в окоето Ви. След това освободете долния клепач и бавно затворете окоето, за да може КАЛИЙ-У без консервант да се разпредели равномерно по повърхността на окоето. Моля имайте предвид, че може да има няколко секунди забавяне между стискането на бутилката и изтичането на капката. Бутилката не трябва да се стиска твърде силно.

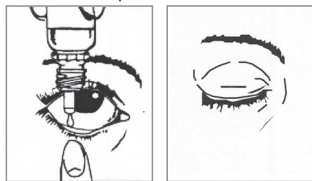

- Ако е необходимо, повторете процедурата и за другото око.



- След употреба бутилката трябва да се изтръска веднъж надолу, без да се докосва върхът на капкомера, за да се отстрани остатъчната течност от върха. Това е необходимо, за да се осигури стерилността на капките за очи и за полесното освобождаване на следващата капка при последващо приложение.
- Веднага след приложение затворете плътно капачката на бутилката.

#### 4. Възможни нежелани реакции

КАЛИЙ-У без консервант обикновено се понася добре. Веднага след накапването може да възникне моментно чувство на леко парене.

След дълго неконтролирано приложение (при приложение на повече от необходимата доза) при чувствителни пациенти може да доведе до така наречения „йодизъм“. Той се проявява с дразнене на конюнктивата и изпълването ѝ с кръв, с повишена секреция на сълзи и евентуално възникване на оток на клепачите (едем на Квинке) и оток на слъзните жлези; по кожата могат да се появят еритема, акне, дерматит и пурпура.

Ако се появи някоя от описаните нежелани реакции или други необичайни реакции, информирайте Вашия лекуващ лекар.

#### 5. Какво съдържа КАЛИЙ-У без консервант

Натриев хлорид 2mg/1ml, калиев йодид, натриев тиосулфат, динатриев едетат, натриев хидроксид, пречистена вода.

#### 6. Как да съхранявате КАЛИЙ-У без консервант и допълнителна информация

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°C.

Да не се охлажда или замразява.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте продукта след изтичане на срока на годност, отбелязан върху етикета или картонената кутия след символа „пясъчен часовник“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте КАЛИЙ-У без консервант повече от 12 седмици след първото отваряне на бутилката. Веднага след приложение на КАЛИЙ-У без консервант плътно затворете капачката на бутилката.

Опаковка 1x10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava,

Словашка република

Tel: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: [unimedpharma@unimedpharma.sk](mailto:unimedpharma@unimedpharma.sk)

[www.unimedpharma.eu](http://www.unimedpharma.eu)



Дата на последно преразглеждане: Март 2021